

"Sterile Absorbable

POLYDIOXANONE Suture with Needle"



MESO
MESO LIFTING THREAD



Ver. 1.0

LIFTING ΝΗΜΑΤΩΝ

Το lifting νημάτων αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία ιατρικής αισθητικής για lifting η οποία περιλαμβάνει την ανύψωση διαφορετικών περιοχών του προσώπου (μέτωπο, σαγόνι, ρινοπαρειακές πτυχώσεις, μέση περιοχή, κτλ.) και του σώματος (γλουτούς, βραχίονες, κοιλιά, κτλ.) με τη χρήση ειδικών νημάτων και χωρίς τις χειρουργικές τομές του κλασσικού lift κατά το οποίο αφαιρούνται μεγάλες επιφάνειες περίσσειου δέρματος, λίπους και ιστών.



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ LIFTING ΝΗΜΑΤΩΝ



Εισαγωγή των βιοδιασπώμενων νημάτων



**Τα νήματα τραβιούνται μέχρι να ανορθωθεί
ή να συσφιχθεί η στοχευμένη περιοχή,
σταθεροποιούνται και στερεώνονται στους ιστούς.**



**Φυσική διαδικασία επούλωσης τραύματος &
αντίδραση σε ξένο σώμα**

Ανόρθωση, Σύσφιξη, Λάμψη

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ LIFTING ΝΗΜΑΤΩΝ

Φυσική διαδικασία επούλωσης τραύματος



ΣΤΑΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αμέσως
μετά

- Άμεσα ορατό αποτέλεσμα εξαιτίας οιδήματος

15-30
ημέρες

- Ενεργοποίηση διαδικασίας επούλωσης τραύματος

~60
ημέρες

- Συνέχιση της κολλαγονογένεσης

180-200
ημέρες

- Διάλυση (απορρόφηση) νήματος

200
ημέρες~

- Συνέχιση δραστικών αποτελεσμάτων - ακόμη και μετά την απορρόφηση του νήματος το φαινόμενο της ανόρθωσης / αναδόμησης παρατείνεται

ΤΥΠΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ

Βιο-διασπώμενο / απορροφήσιμο

Catgut: ↓ 90 ημέρες, κίνδυνος
μόλυνσης

PGA, PGLA: ↓ 120-180 ημέρες,
πολύινο

Polydioxanone: ↓ 180 ημέρες,
μονόινο

Μη-απορροφήσιμο


Polyester

PVDF

Polypropylene

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ανόρθωση προσώπου (Face lifting)
- Βαθιές ρινοπαρειακές ρυτίδες - μέτωπο
- Γέμισμα μεσαίας περιοχής προσώπου
- Σύσφιξη/διόρθωση χαλάρωσης σε σαγόνι και διπλοσάγωνο
- Ανόρθωση σώματος (Body lifting): Άνω μηροί, βραχίονες, κοιλιά, γλουτοί

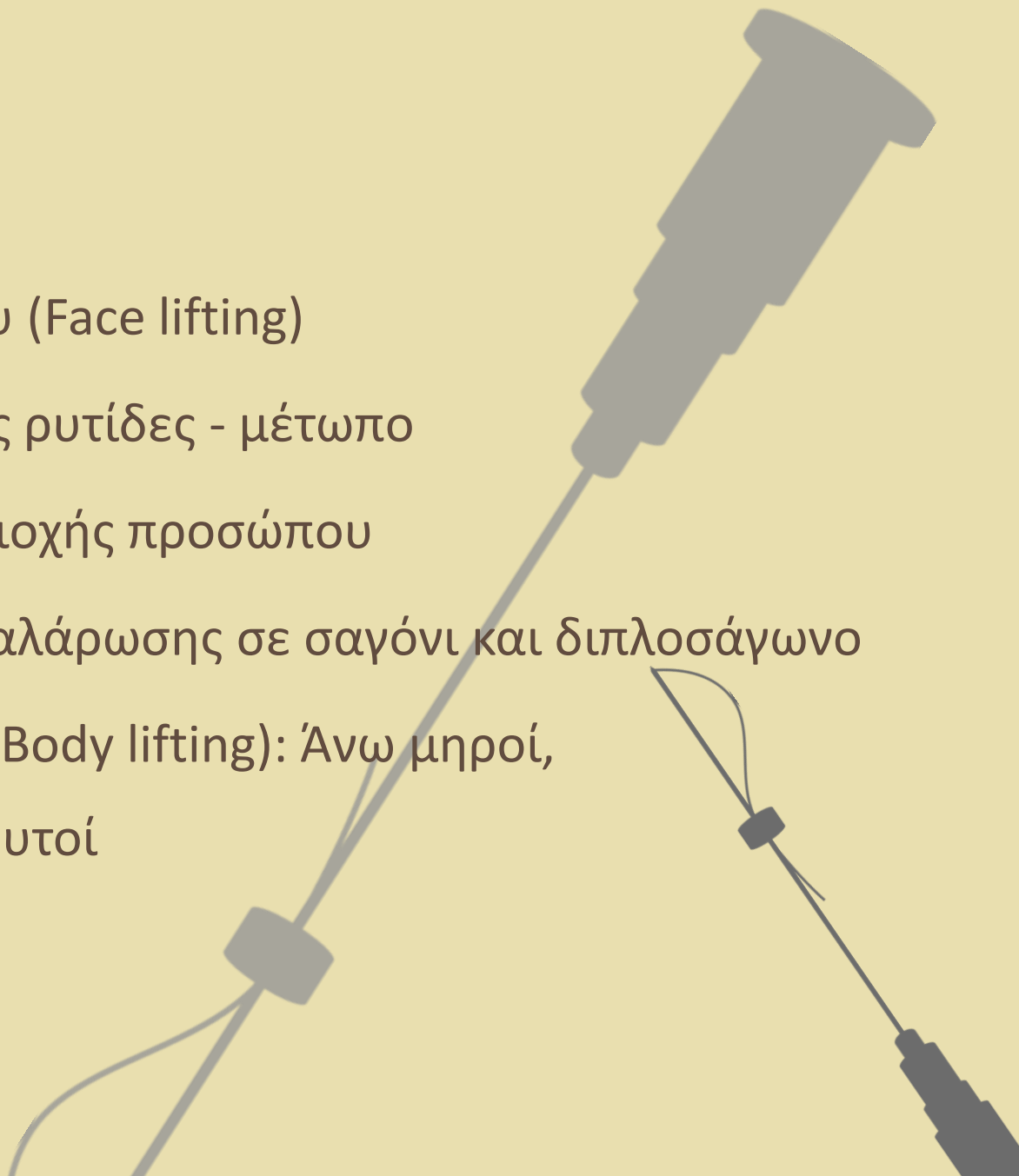

MESOTRAX

MESO LIFTING THREAD

Τα νήματα MESOTRAX προσφέρουν μια άμεση και φυσική βελτίωση της εμφάνισης χωρίς την ανάγκη χειρουργείου.

Κύρια χαρακτηριστικά των νημάτων MESOTRAX



1. Προηγμένη τεχνογνωσία
& ποιότητα κοπής βελόνας /
τεχνολογία κατασκευής βελόνας



2. Νήμα υψηλής ποιότητας
& ασφάλειας


Κύρια χαρακτηριστικά των νημάτων MESOTRAX

3. Υπεροχή ποιότητας και αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα της ίδιας κατηγορίας

Σύγκριση- Mono



[Συμβατικό
Mono PDO]

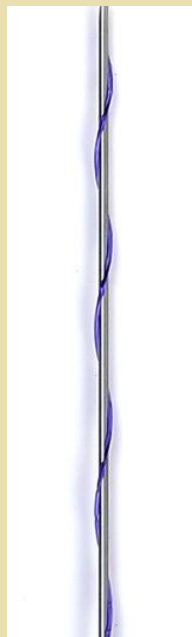


[MESOTRAX
Mono PDO]

Σύγκριση – Τύπος σπирάλ



[Συμβατικό
Mono PDO]

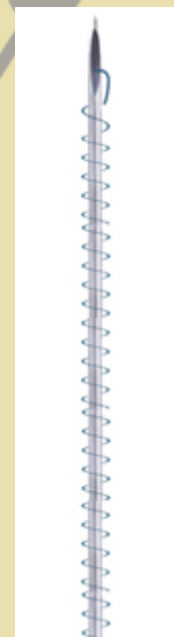

[MESOTRAX
Mono PDO]


ADVANTAGES of MESOTRAX

MESOTRAX THREAD LIFTING

- Ελάχιστος χρόνος αποθεραπείας
- Καμμία παρενέργεια
- Λιγότερος πόνος
- Άμεσο αποτέλεσμα

Τύποι νημάτων MESOTRAX

Τμήματα MESOTRAX

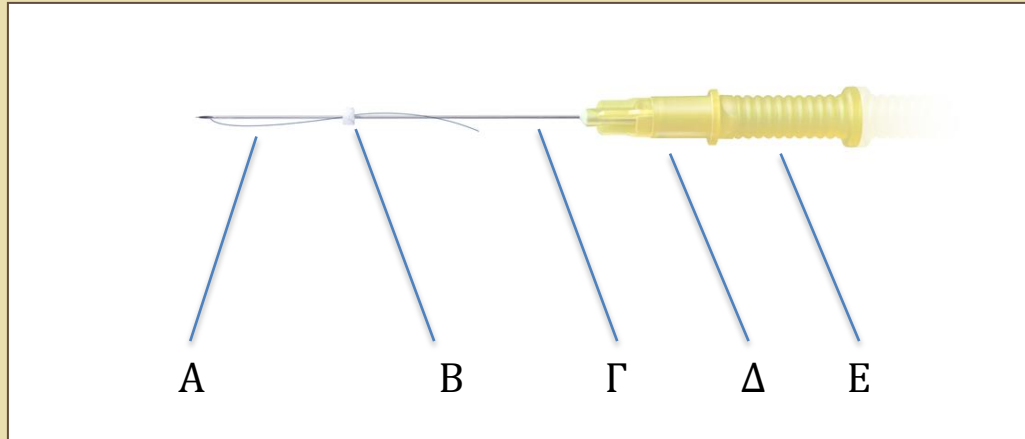

- A) Νήμα:** Το απορροφήσιμο νήμα εισέρχεται στο χόριο / υποδόριο ιστό/μυ/ ανάλογα με το σκοπό της διαδικασίας. Μόλις η βελόνα αφαιρεθεί, μετά την εισαγωγή, το νήμα εμφυτεύεται στο δέρμα.
- B) Σφουγγάρι:** Το σφουγγάρι κρατάει τη βελόνα και το απορροφήσιμο νήμα στη θέση τους.
- Γ) Βελόνα:** Το τμήμα το οποίο εισάγεται ώστε να εμφυτευθεί το απορροφήσιμο νήμα.
- Δ) Άξονας βελόνας:** Ο άξονας βρίσκεται στο ένα άκρο της βελόνας
- Ε) Λαβή :** Χρησιμοποιείται κατά την εισαγωγή της βελόνας. Για τα προϊόντα που δεν διαθέτουν λαβή, ο άξονας μπορεί να παίξει το ρόλο της λαβής.

MESOTRAX TWISTED MONO

Το TWISTED MONO είναι ένα μονόκονο νήμα πολυδιοξανόνης με ομαλή επιφάνεια που χρησιμοποιείται κατά βάση για τις διαδικασίες lifting νημάτων MESOTRAX. Είναι αποτελεσματικό για ήπιο lifting και αναζωογόνηση. Το TWISTED MONO είναι εύκολο στην εισαγωγή.



ITEM	Διάμετρος	Χρώμα άξονα	USP	Μήκος βελόνας	Μήκος νήματος
TWISTED MONO	30G	Κίτρινο	6-0	25mm	30mm
	29G	Ροζ	6-0	38mm	55mm
				50mm	75mm
	27G	Γκρι	5-0	60mm	90mm

100 τμχ / Κουτί

Ένα κουτί αποτελείται από 10 σακουλάκια Vacuum.

Κάθε σακουλάκι Vacuum περιέχει 2 αποστειρωμένα πακέτα των 5 νημάτων έκαστο.

MESOTRAX SUPER SPRING

Το νήμα περιελίσσεται γύρω από τη βελόνα. Είναι τεντωμένο όταν εισάγεται στο δέρμα, αλλά έχει την ιδιότητα να γυρίζει πίσω στην αρχική του θέση περιέλιξης αφού εισαχθεί.

Λόγω της ελαστικότητας του, το MESOTRAX SUPER SPRING παρουσιάζει έντονα αποτελέσματα ανόρθωσης, όγκου και σύσφιξης, επομένως και με ένα μικρό αριθμό νημάτων μπορεί να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα



[Λεπτομέρεια της σπείρας]

ITEM	Διάμετρος	Χρώμα άξονα	USP	Μήκος βελόνας	Μήκος νήματος
SUPER SPRING	29G	Ροζ	6-0	25mm	30mm
				38mm	55mm
				50mm	75mm

100 τμχ / Κουτί

Ένα κουτί αποτελείται από 10 σακουλάκια Vacuum.

Κάθε σακουλάκι Vacuum περιέχει 2 αποστειρωμένα πακέτα των 5 νημάτων έκαστο.

MESOTRAX COG

Το **MESOTRAX COG** χρησιμοποιεί ένα νήμα που διαθέτει αμφίδρομες ακίδες. Τα νήματα αμφίδρομων ακίδων κατασκευάζονται από μονόινα νήματα μέσω μιας τεχνικής μικροκατεργασίας που κόβει τις ακίδες στο νήμα. Σε σύγκριση με τα συμβατικά λεία νήματα, τα άνω και κάτω αμφίδρομα ακιδωτά νήματα είναι σε θέση να προσφέρουν πολλαπλά πλεονεκτήματα. Όταν εισάγονται, τα ακιδωτά νήματα αγκυλώνουν στους ιστούς του δέρματος και στηρίζουν την ανόρθωση. Το νήμα παραμένει πολύ πιο σταθερό και η ανορθωτική δράση διαρκε περισσότερο. Αλλά η θεραπεία απαιτεί υψηλή τεχνική εξειδίκευση και απαιτείται τοπική αναισθησία για τον έλεγχο του πόνου κατά τη θεραπεία.

Το **MESOTRAX SPIRAL SHARP COG** διαθέτει αιχμηρή βελόνα, ενώ το **MESOTRAX SPIRAL BLUNT COG** διαθέτει κάνουλα που προκαλεί λιγότερο πόνο, έχει λιγότερο κίνδυνο για μώλωπες, καθώς και ένα καλύτερο προφίλ ασφάλειας.



[MESOTRAX SPIRAL SHAPR COG]



[MESOTRAX SPIRAL BLUNT COG]

MESOTRAX COG

- Ειδικό χαρακτηριστικό των MESOTRAX SPIRAL COG:

→ **Αμφίδρομο 3D (τρισδιάστατο)COG**

Οι ακίδες του MESOTRAX SPIRAL COG κατασκευάζονται με τη χρήση της τεχνικής κοπής περιστροφής 360°C.

Η τεχνική επιτρέπει ομοιόμορφη αγκύλωση των ακίδων σε κάθε ιστό, γεγονός που αποτρέπει τα προβλήματα ασυμμετρίας, μια κοινή επιπλοκή των θεραπειών COG.



MESOTRAX COG

ITEM	Διάμετρος	Χρώμα άξονα	USP	Μήκος βελόνας	Μήκος νήματος
SPIRAL SHARP COG	23G	Blue	3-0	38mm	95mm
				60mm	115mm
				90mm	145mm

ITEM	Διάμετρος	Χρώμα άξονα	USP	Μήκος βελόνας	Μήκος νήματος
SPIRAL BLUNT COG	21G	Green	3-0	38mm	95mm
				60mm	115mm
	19G	Cream	3-0	90mm	145mm

ULTRA SPRING



1) Βασικά χαρακτηριστικά

Το **ULTRA SPRING** αποτελεί ένα πυκνό σπιδράλ νήμα, ειδικά μελετημένο ώστε να βελτιώνει τα αποτελέσματα ανύψωσης και όγκου. Ένα ειδικό πώμα εξασφαλίζει την ακαμψία του νήματος πάνω στη βελόνα, με συνέπεια η αντίσταση κατά την εισαγωγή της βελόνας μέσα στο δέρμα να είναι σχετικά υψηλότερη από τα άλλα είδη νημάτων. Ωστόσο, όταν εισάγεται, έχει την ιδιότητα να έρχεται σε επαφή με μεγάλη επιφάνεια του ιστού και κατά συνέπεια να ενισχύει την κολλαγονογένεση και να προκαλεί μεγάλη αυξητική επίδραση.

2) Προϊόν

Ονομασία	Gauge / χρώμα άξονα / διάμετρος βελόνας	Μήκος βελόνας	Μήκος νήματος	USP
ULTRA SPRING	27G / Γκρι / 0.412~0.413	40mm	100mm	6-0

3) Συσκευασία

Χρώμα: **Μωβ**



EYE LIFT

1) Βασικά χαρακτηριστικά

Το EYE LIFT αποτελεί ένα λεπτό νήμα PDO με μία αμβλεία κάνουλα το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ασφαλή θεραπεία της περικογχικής περιοχής, χωρίς να προκαλεί ρήξη των τριχοειδών αγγείων.

2) Προϊόν

Ονομασία	Gauge / χρώμα άξονα / διάμετρος βελόνας	Μήκος βελόνας	Μήκος νήματος	USP
EYE LIFT	30G / Κίτρινο / 0.298 ~ 0.320	25mm	35mm	6-0

3) Συσκευασία

Χρώμα: **Ανοιχτό πράσινο**



DIAMOND V FIXER

Τι είναι το DIAMOND V FIXER?

Πρόκειται για lifting προσώπου που πραγματοποιείται με ένα ειδικό νήμα PDO(πολυδιοξανόνη) με στόχο την επαναφορά της γραμμής “V” στο πρόσωπο μέσω της ανόρθωσης των χαλαρών δερματικών ιστών.

Οι δραστηριότητες της/του ασθενούς μπορούν να συνεχιστούν κανονικά την ίδια κιόλας ημέρα μετά την ολοκλήρωση της ανώδυνης, μη χειρουργικής διαδικασίας.

Η θεραπευτική διαδικασία απαιτεί μόνο τοπική αναισθησία.



Cutting suture A




Cutting suture B



Cutting suture C

Περιγραφή

Ονομασία Προϊόντος	DIAMOND V FIXER
Τύπος Υλικού	PDO (Πολυδιοξανόνη)
Βελόνα	18G 100mm
Μήκος Νήματος	19.5Cm(COG part – 9Cm)
Μέγεθος USP	1-0
Σχεδιασμός Ακίδας	Mirror Type 180 Twin barbs bi-directional
Τεμάχια ανά Συσκευασία	4

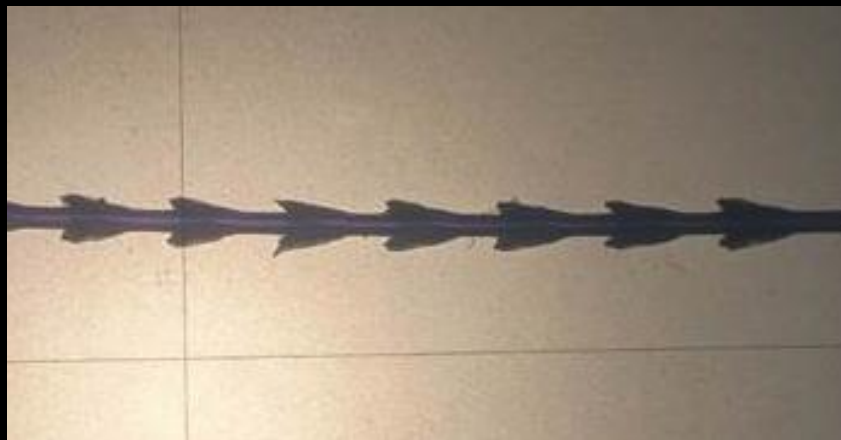

Δράση

- ✓ Ανόρθωση περιγράμματος προσώπου
- ✓ Βελτίωση γραμμών μαριονέτας
- ✓ Βελτίωση ρινοχειλικών πτυχώσεων
- ✓ Διάρκεια αποτελέσματος 1-2 χρόνια

Καινοτομία

Το DIAMOND V FIXER διαθέτει 180 διπλές ακίδες πάνω στο νήμα για αποτελεσματική και ομοιόμορφη αγκίστρωση στους ιστούς.

Με 3 φορές υψηλότερη ισχύ αγκίστρωσης & εφελκυσμού σε σύγκριση με τα νήματα κοπής (cut-threads) τα νήματα DIAMOND V FIXER προσφέρουν ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό lifting προσώπου χωρίς να κόβονται κατά τη διαδικασία εισαγωγής.


Ωφέλη

- ✓ Ισχυρός εφελκυσμός
- ✓ Ισχυρή αγκίστρωση
- ✓ Αποτέλεσμα διαρκείας (1-2 χρόνια)
- ✓ Ελάσσωσιν αντίδραση ιστών
- ✓ Ελάσσωσιν τραυματισμός ιστών


Ωφέλη

✓ Μεγάλη διάρκεια

DIAMOND V FIXER
USP 2-0

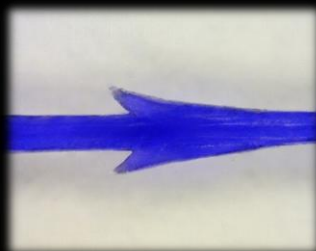

Cutting Thread
USP 1-0

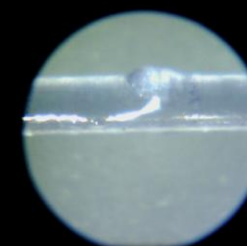

0 Ημέρα

30 μέρες μετά

90 μέρες μετά

Ωφέλη

✓ Ασφάλεια

- Πολυδιοξανόνη

:Βιοδιασπώμενο υλικό (180ημέρες)

- Συσκευασία 2 στρωμάτων

: Το DIAMOND V FIXER διατίθεται σε συσκευασία ασφαλείας με άζωτο για την πρόληψη μολύνσεων και για ασφαλή κλινική χρήση.

- Αποστειρωμένο με E0 Gas

Σύγκριση

DIAMOND V FIXER





	Cutting thread1	Cutting thread2	Cutting thread3	Molding thread	Mold cutting thread
Ισχύς εφελκυσμού	+	+	+++	+++++	+++++
Ισχύς αγκίστρωσης	+	+	++++	+++++	+++++
Διάρκεια	+	+	+++	++++	+++++
Τραύμα ιστών	++	++	+++	+++++	++
Τιμή	+	++	++++	+++++	++++
Χρόνος διαδικασίας	20λεπτά	20λεπτά	20λεπτά	30λεπτά	20λεπτά
Τιμή διαδικασίας	+	+	++	++++	++++



Παρενέργειες

- ✓ Οίδημα
- ✓ Μώλωπας
- ✓ Μόλυνση
- ✓ Αντίδραση σε ξένο σώμα
- ✓ Τραυματισμός αγγείων
- ✓ Πόνος : PDO με ακίδες
- ✓ Αλλεργία σε μέταλλο
- ✓ Μετατόπιση


Διαδικασία

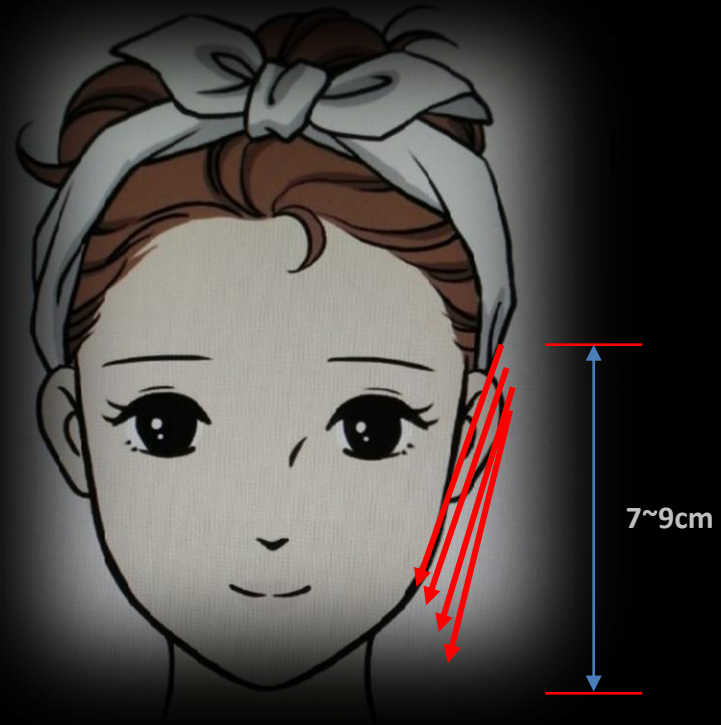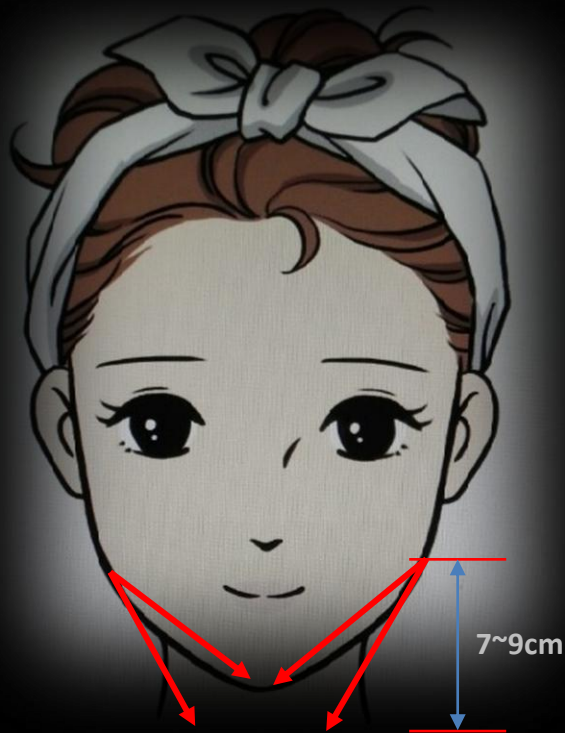

Επικίνδυνη περιοχή

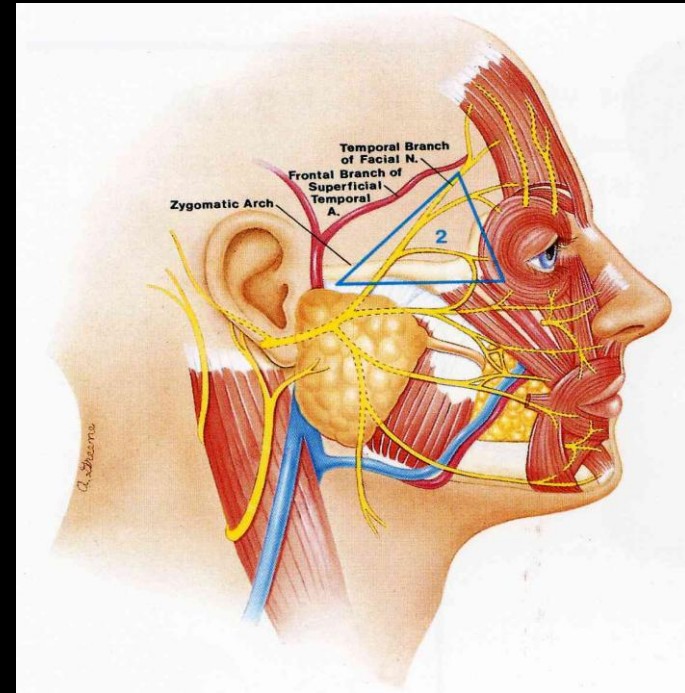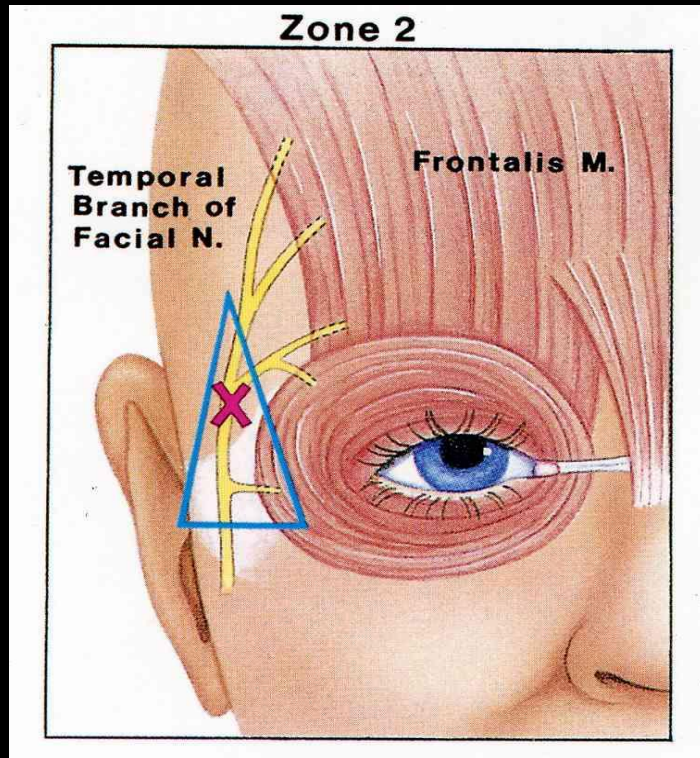

Επικίνδυνη περιοχή

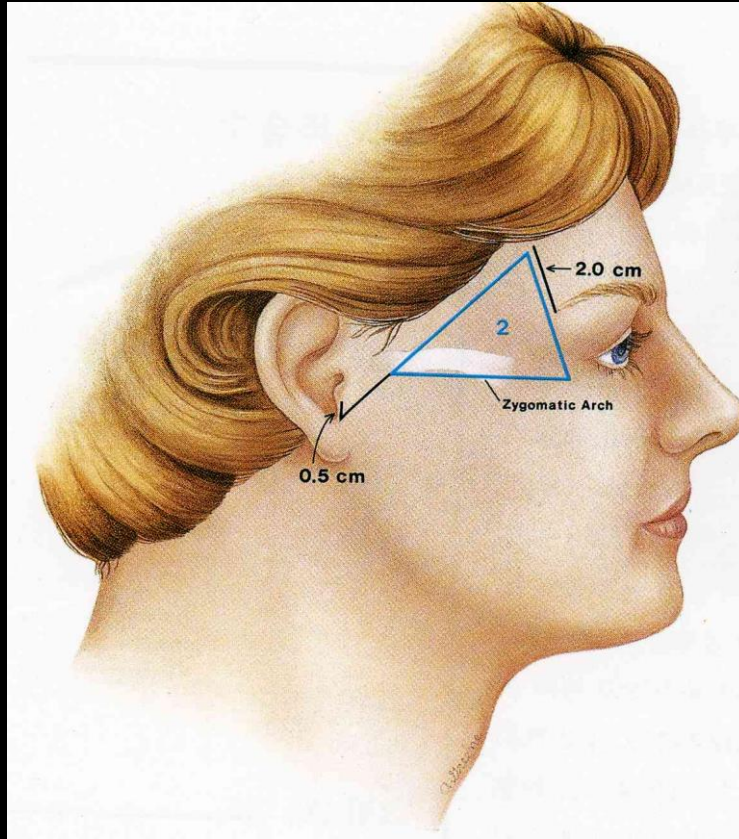

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1. Διαβούλευση

Το δέρμα του ασθενούς θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς, καθώς επίσης και οι προσδοκίες του.

Στους ασθενείς θα πρέπει να δοθούν οι παρακάτω εξηγήσεις:

- Πως λειτουργεί η θεραπεία.
- Αριθμός των απαιτούμενων θεραπειών για να επιτευχθεί ο θεραπευτικός στόχος καθώς και κόστος θεραπειών.
- Διάστημα που απαιτείται πριν παρατηρηθεί το αποτέλεσμα.
- Επιπλοκές
- Αλλαγή του δέρματος μετά τη θεραπεία
- Προφυλάξεις μετά τη θεραπεία

2. Έντυπο συγκατάθεσης

Μετά τη διαβούλευση, αν ο ασθενής αποφασίσει να προχωρήσει με τη θεραπεία, θα πρέπει να διαβάσει και να υπογράψει το έντυπο συγκατάθεσης για να επιβεβαιώσει ότι κατανοεί όλες τις παραμέτρους της θεραπείας.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

3. Προετοιμασία

- Καθαρισμός
(Χρησιμοποιήστε οινόπνευμα για να απομακρύνετε την περίσσεια σμήγματος από την επιφάνεια του δέρματος μετά τον καθαρισμό. Αυτό θα επιτρέψει την πιο αποτελεσματική απορρόφηση του τοπικού αναισθητικού.)
- Προχωρήστε σε λήψη φωτογραφιών πριν τη θεραπεία
- Προχωρήστε σε διάγνωση
- Εφαρμόστε την αναισθητική κρέμα για 30 ~ 60 λεπτά, ανάλογα με τον τύπο του αναισθητικού παράγοντα και την ένταση της διαδικασίας
- Απολυμάνετε την περιοχή θεραπείας
- Προχωρήστε σε σχεδιασμό και σήμανση
- Για βελόνες παχύτερες των 27G απαιτείται νευρική αναισθησία, ενώ δεν απαιτείται για βελόνες 29G και 30G


ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1. Προετοιμασία

Βάθος	Δράση	Οδηγίες
Χόριο	Αφαίρεση λεπτών ρυτίδων	
Υποδόριος ιστός	Μείωση υποδόριου λίπους, Ανόρθωση	
Μυς	Χαλάρωση ή συρρίκνωση μυών, Αφαίρεση βαθιών ρυτίδων	1) Παράλληλα με τις μυικές ίνες - Ενίσχυση των μυών 2) Κάθετα στις μυικές ίνες - Χαλάρωση των μυών





ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Τεχνική εισαγωγής

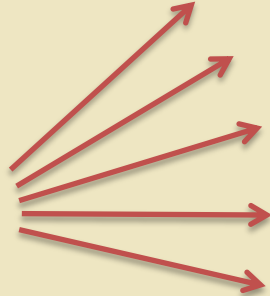Διαδοχικά	
Παράλληλα	
Βεντάλια	




ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Τεχνική εισαγωγής

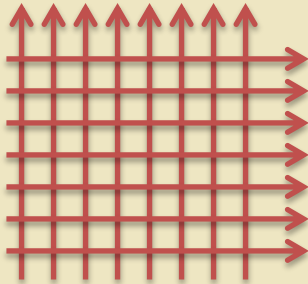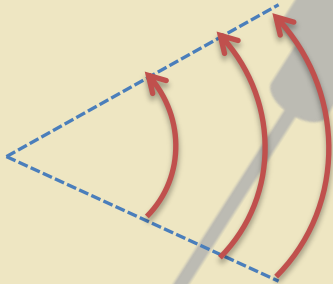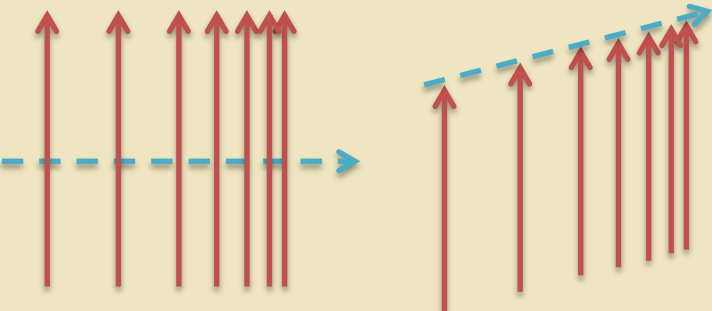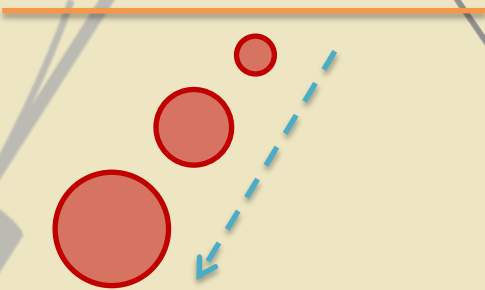Διαγράμμιση (πλέγμα)	Ομόκεντρος κύκλος
	
Vector (Plane & Depth)	
 In plane	 Out of plane or in depth direction

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Τεχνική εισαγωγής

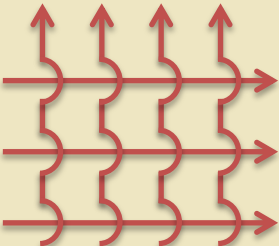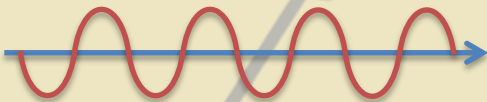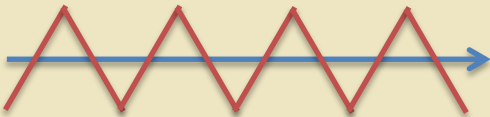Κυματισμός	Κυματισμός
 Κρατώντας τις βελόνες εσωτερικά	
Ζιγκ Ζαγκ	Τράβηγμα και Κοπή νήματος
	Μετά την εισαγωγή, τραβήξτε και κόψτε το νήμα έτσι ώστε να μη μείνει εξέχον νήμα από το δέρμα. Καλύψτε το σημείο εισόδου με επίδεσμο για προστασία και πρόληψη των μολύνσεων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Οδηγός Θεραπείας

- Εφαρμογή σύμφωνα με τη διάμετρο και το μήκος της βελόνας

Διάμετρος	Μήκος βελόνας	Χρήση
27G	60mm	Τοπική παχυσαρκία, lifting σώματος
29G	38, 50mm	Ρινοπαρειακές πτυχώσεις, γραμμές μεσόφρουου, γραμμές μετώπου, αύξηση μετώπου, αύξηση σαγονιού
29G, 30G	38mm	Σακούλες ματιών,
	25mm	Γραμμές δακρύων, γραμμές μεσόφρουου
COG 23G, 21G	60mm	Ανόρθωση γραμμών πικρίας, ανόρθωση ρινοπαρειακών πτυχώσεων, ανόρθωση φρυδιών, ανόρθωση τριχωτού
COG 19G	90mm 100mm	Ανόρθωση γραμμών πικρίας, ανόρθωση ρινοπαρειακών πτυχώσεων, Ανόρθωση γραμμών μαριονετας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Οδηγός θεραπείας

- Οδηγός εισαγωγής νημάτων

Περιοχή	Βάθος εισαγωγής	Συνιστώμενος τύπος προϊόντος			Απόσταση εισαγωγής	Συνολικός αριθμός νημάτων	Τεχνική εισαγωγής
		TWISTED MONO (βασικός τύπος)	SUPER SPRING (Ισχυρότερη δράση απο τα PDO, ένας μικρός αριθμός μπορεί να συνδυαστεί με PDO)	COG (νήμα με ακίδες για εντατικό lifting)			
Lifting προσώπου	Επιδερμικό μυϊκό σύστημα Εν τω βάθει χόριο	29G 50mm			5mm ~10mm	100~300	Πλέγμα, Βεντάλια
Περικογχικές ρυτίδες	Υποδόριος ιστός	29G/30G 25/38mm			1~2mm	30~50	Πλέγμα
Φρύδια	Fascia	29G/30G 25/38mm	29G 25/38mm	23G 60mm 21G 60mm	10mm	5~10	Παράλληλη
Γραμμές δακρύων	Εν τω βάθει χόριο	29G/30G 25/38mm			1mm	20~30	Διαδοχική, Παράλληλη
Μεσόφρυο	Μυϊκός ιστός	29G/30G 25/38mm	29G 25/38mm		5mm	5~10	Πλέγμα
Σαγόني	Εν τω βάθει χόριο	29G 38/50mm	29G 38/50mm		5mm	10~30	Πλέγμα, Κύμα, Βεντάλια
Ρυτίδες μετώπου	Εν τω βάθει χόριο	29G 38/50mm	29G 38/50mm		5~10mm	30~150	Πλεγμα, Κύμα

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Οδηγός θεραπείας

- Οδηγός εισαγωγής


Περιοχή	Βάθος εισαγωγής	Συνιστώμενος τύπος προϊόντος			Απόσταση εισαγωγής	Συνολικός αριθμός νημάτων	Τεχνική εισαγωγής
		TWISTED MONO (basic type)	SUPER SPRING (Ισχυρότερη δράση απο τα PDO, ένας μικρός αριθμός μπορεί να συνδυαστεί με PDO)	COG (νήμα με ακίδες για εντατικό lifting)			
Γραμμές σαγονιού	Εν τω βάθει χόριο, υποδόριος ιστός	29G 38/50mm		21G 60/90mm 19G 100mm		20~50	Διαδοχική, Βεντάλια
Γραμμές μαριονέτας	Εν τω βάθει χόριο	29G 38/50mm	29G 38/50mm	21G 60/90mm 19G 100mm		10~30	Πλέγμα, Έλικά
Ρινοπαρειάκες ρυτίδες	Εν τω βάθει χόριο, SMAS	29G 38/50mm	29G 38/50mm	23G 60/90mm 21G 60/90mm 19G 100mm	5mm	20~60	Διαδοχική Παράλληλη, Πλέγμα
Άνω βραχίονες	Υποδόριος ιστός	27G 60mm	29G 50mm		10mm	30~50	Παράλληλη, Πλέγμα
Hip up	Fascia	27G 60mm	29G 50mm		10mm	30~50	Ομόκεντρος κύκλος, πλέγμα
Διπλοσάγωνο	Υποδόριος ιστός, πρόσθια κοιλία διγαστρικού μυ	29G 38/50mm	29G 38/50mm		10mm	10~30	Πλέγμα
Ρυτίδες λαιμού	Μυς πλατύσματος (οριζοντίως) Εν τω βάθει χόριο (Καθέτως)	29G 38mm	29G 38mm		10mm	50~150	Πλέγμα
Κοιλιακό αδυνάτισμα /Lifting	Υποδόριος ιστός	27G 60mm	29G 50mm		10mm	30(slimming)~100(lifting)	Παράλληλη

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Οδηγός θεραπείας


Στόχος θεραπείας - περιοχή	Face scaffold	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Επιφανειακό μυικό σύστημα	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 29G 50mm	
Τεχνική εισαγωγής	Πλέγμα, κύμα	

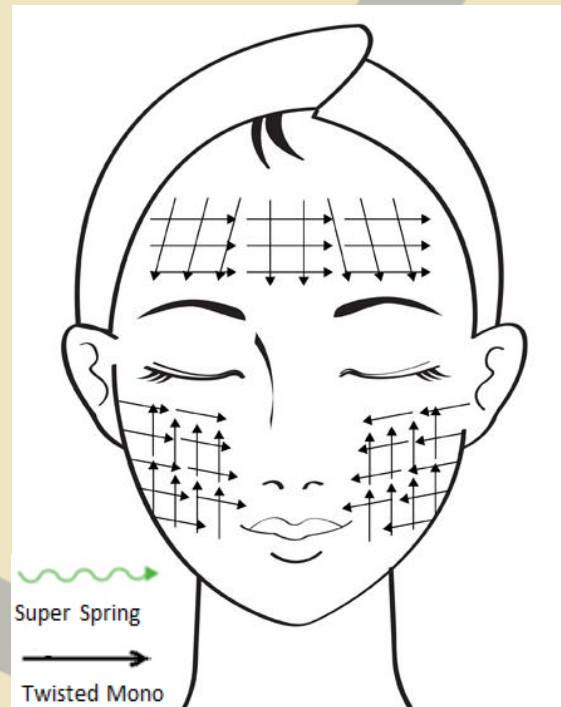

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ


2. Οδηγός θεραπείας

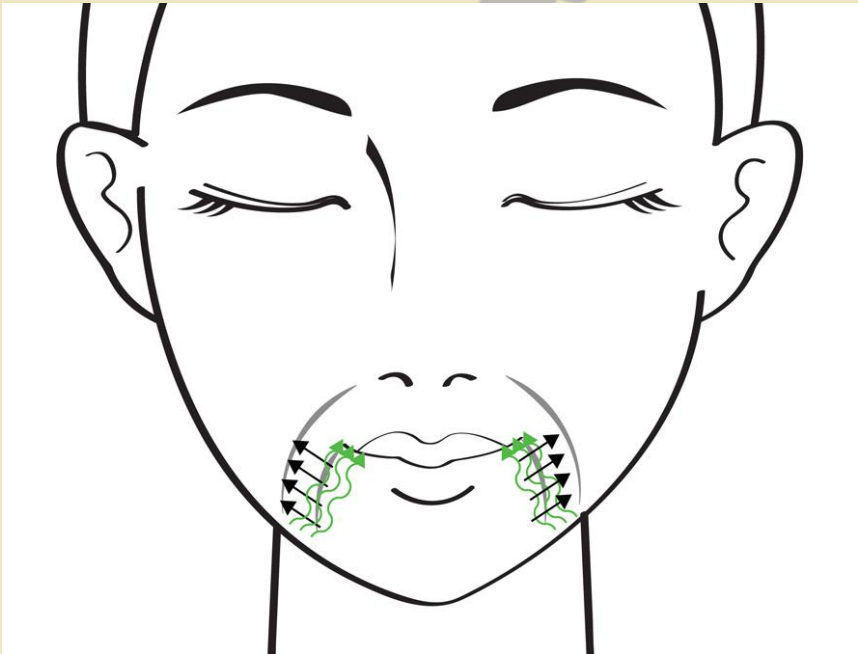Στόχος θεραπείας - περιοχή	Βελτίωση γραμμών μαριονέτας	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Εν τω βάθει χόριο	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 29G 38/50mm SUPER SPRING 29G 38/50mm SPIRAL COG 21G 60/90mm 19G 100mm	
Τεχνική εισαγωγής	Πλέγμα, Βεντάλια	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Οδηγός θεραπείας

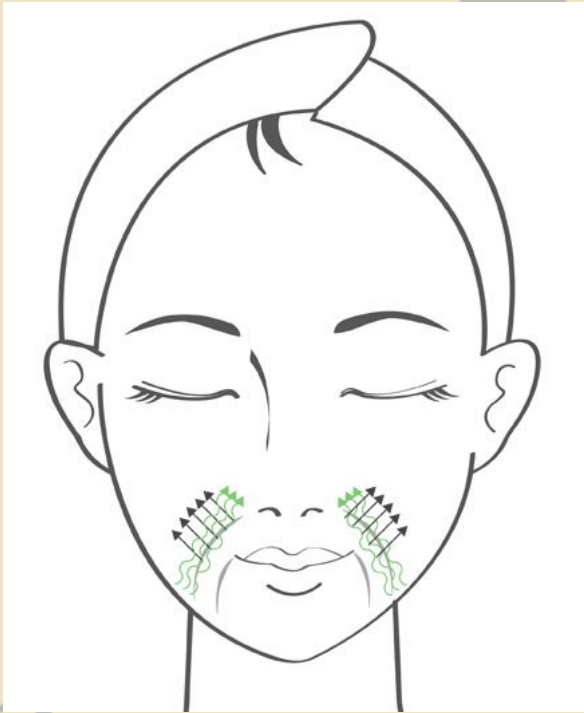Στόχος θεραπείας - περιοχή	Βελτίωση ρινοπαρειακών γραμμών	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Εν τω βάθει χόριο, SMAS (επιφανειακό μυϊκό σύστημα)	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 29G 38/50mm SUPER SPRING 29G 38/50mm SPIRAL COG 23G 60/90mm 21G 60/90mm 19G 100mm	
Τεχνική εισαγωγής	Διαδοχική, Παράλληλη, Πλέγμα	

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Οδηγός θεραπείας

Στόχος θεραπείας - περιοχή	Θεραπεία ρυτίδων μετώπου	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Εν τω βάθει χόριο	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 29G 38/50mm SUPER SPRING 29G 38/50mm	
Τεχνική εισαγωγής	Πλέγμα, Κύμα	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ


2. Οδηγός θεραπείας

Στόχος Θεραπείας - περιοχή	Θεραπεία γραμμών συνοφρύωσης	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Μυϊκός ιστός	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 29G 25/38mm 30G 25/38mm SUPER SPRING 29G 25/38mm	
Τεχνική εισαγωγής	Πλέγμα	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ


2. Οδηγός θεραπείας

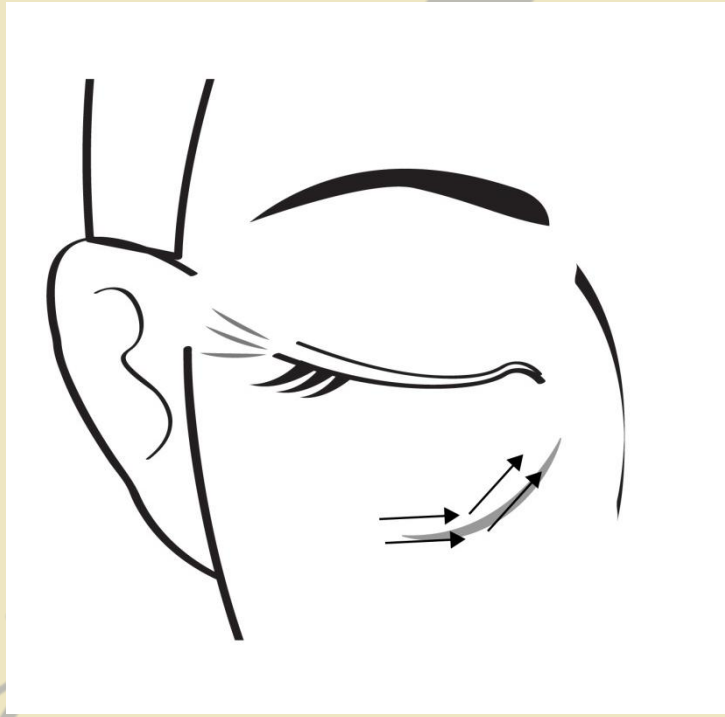Στόχος Θεραπείας - περιοχή	Βελτίωση γραμμών ροής δακρύων	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Εν τω βάθει χόριο	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 29G 25/38mm 30G 25/38mm	
Τεχνική εισαγωγής	Διαδοχική, Παράλληλη	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Οδηγός θεραπείας

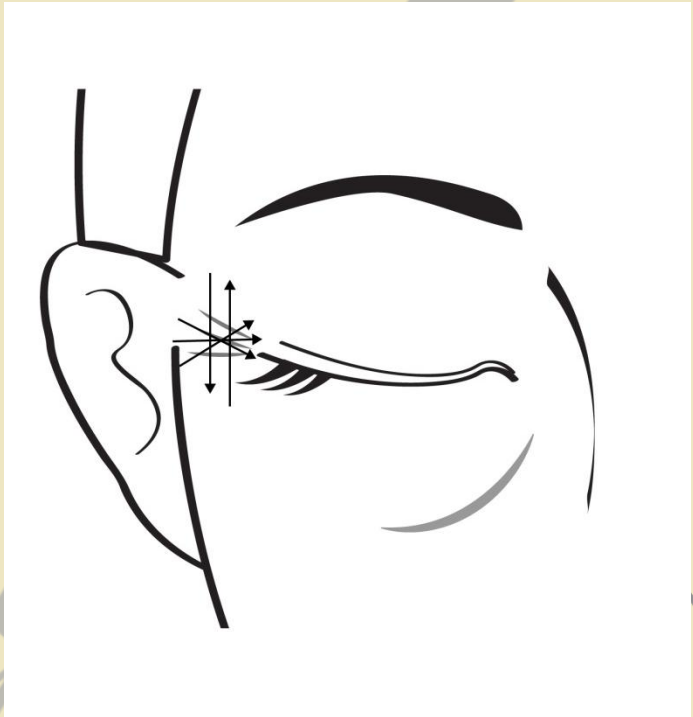Στόχος θεραπείας - περιοχή	Θεραπεία ποδιού της χήνας	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Υποδόριος ιστός	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 29G 25/38mm 30G 25/38mm	
Τεχνική εισαγωγής	Πλέγμα	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ


2. Οδηγός θεραπείας

Στόχος θεραπείας - περιοχή	Θεραπεία γραμμών σαγονιού	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Εν τω βάθει χόριο, Υποδόριος ιστός	 Εισάγετε τις βελόνες κατά μήκος των γραμμών σαγονιού
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 29G 38/50mm SPIRAL COG 21G 60/90mm 19G 100mm	
Τεχνική εισαγωγής	Διαδοχική, Βεντάλια	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ


2. Οδηγός θεραπείας

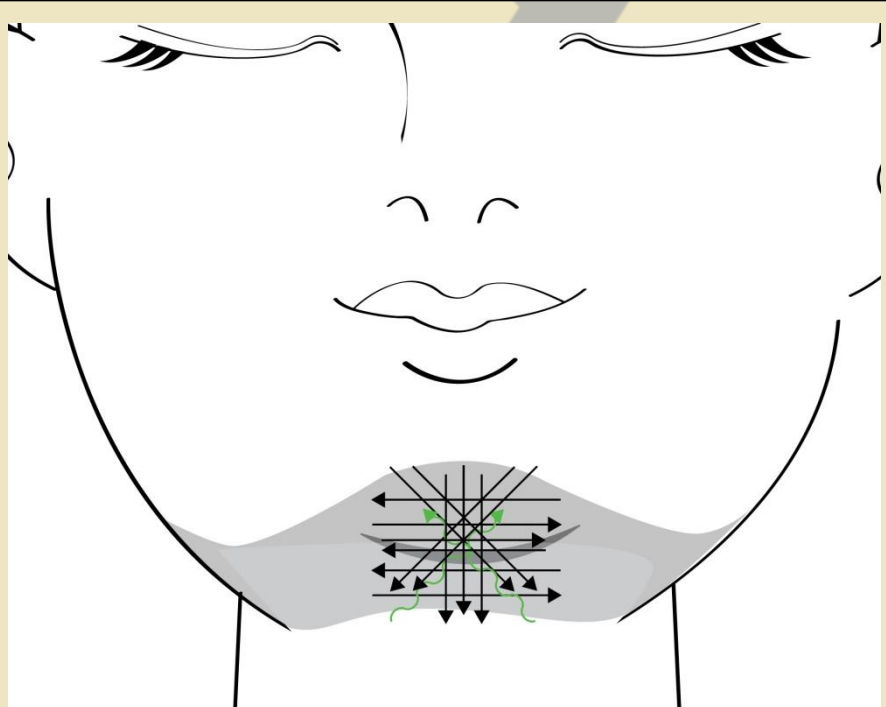Στόχος Θεραπείας - περιοχή	Θεραπεία διπλοσάγονου	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Υποδόριος ιστός, Πρόσθια κοιλία του διγαστρικού μυός	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 29G 38/50mm SUPER SPRING 29G 38/50mm	
Τεχνική εισαγωγής	Πλέγμα	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ


2. Οδηγός θεραπείας

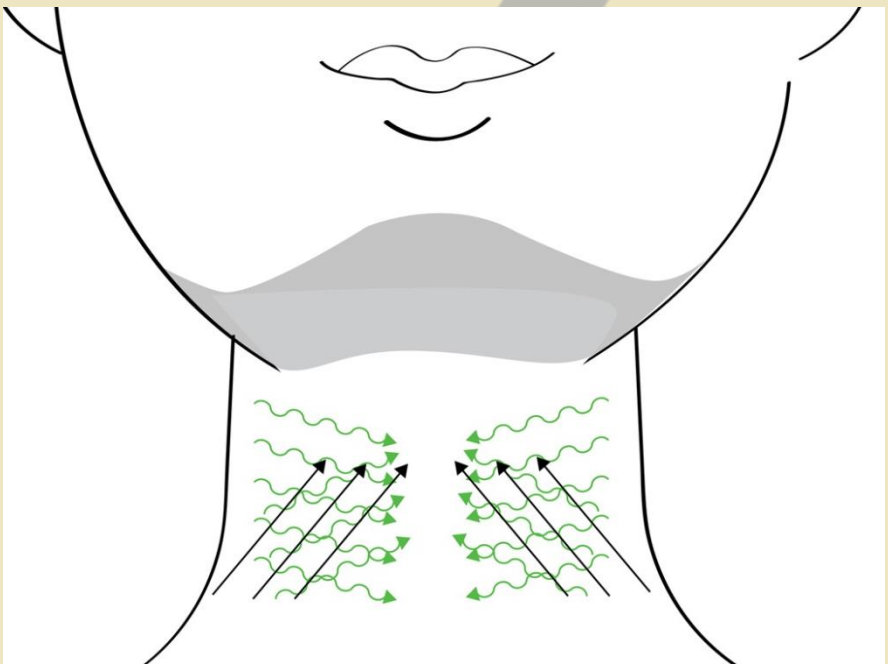Στόχος Θεραπείας - περιοχή	Βελτίωση ρυτίδων λαιμού	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Μυς πλατύσματος (Οριζοντίως) Εν τω βάθει χόριο (Καθέτως)	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 29G 38mm SUPER SPRING 29G 38mm	
Τεχνική εισαγωγής	Πλέγμα	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Οδηγός θεραπείας

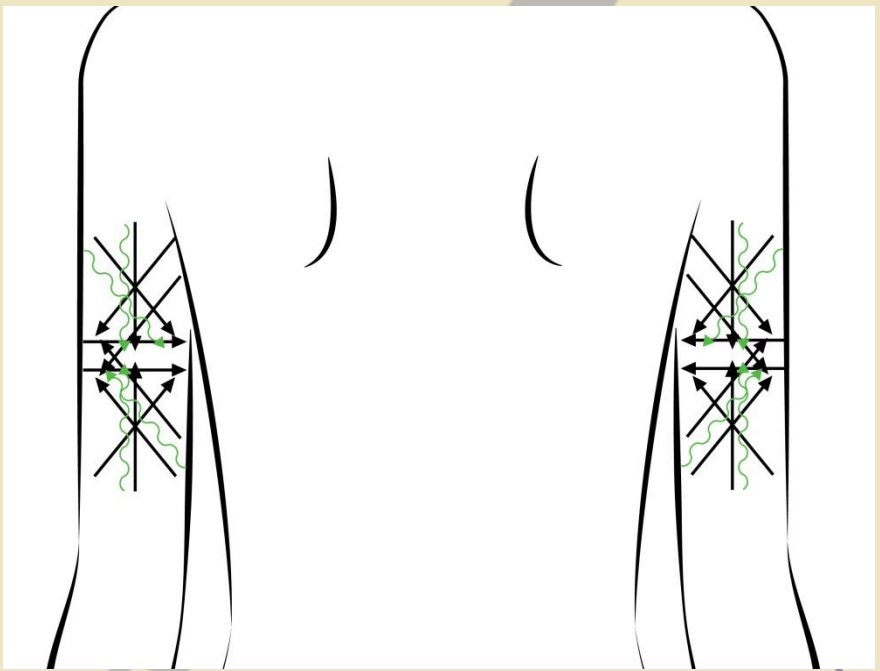Στόχος θεραπείας – περιοχή	Ανόρθωση άνω βραχιόνων	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Υποδόριος ιστός	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 27G 60mm SUPER SPRING 29G 50mm	
Τεχνική εισαγωγής	Παράλληλη, Πλέγμα	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ


2. Οδηγός θεραπείας

Στόχος Θεραπείας - περιοχή	Κοιλιακό αδυνάτισμα	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Υποδόριος ιστός	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 27G 60mm SUPER SPRING 29G 50mm	
Τεχνική εισαγωγής	Παράλληλη	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ


2. Οδηγός θεραπείας

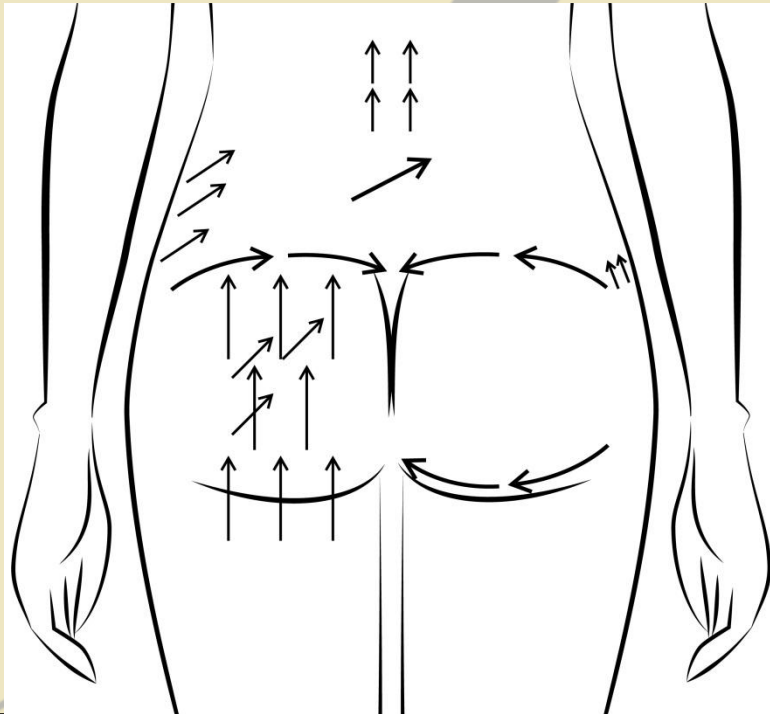Στόχος θεραπείας - περιοχή	Ανόρθωση γλουτών	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Fascia	 A line drawing of a person's buttocks and lower back. The treatment area is indicated by a central vertical line and horizontal lines. Arrows show the needle path: starting from the outer edges of the buttocks, moving inward and then upward towards the center. There are also vertical arrows pointing upwards in the central area.
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 27G 60mm	
Τεχνική εισαγωγής	Ομόκεντρες καμπύλες, Πλέγμα	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Οδηγός θεραπείας

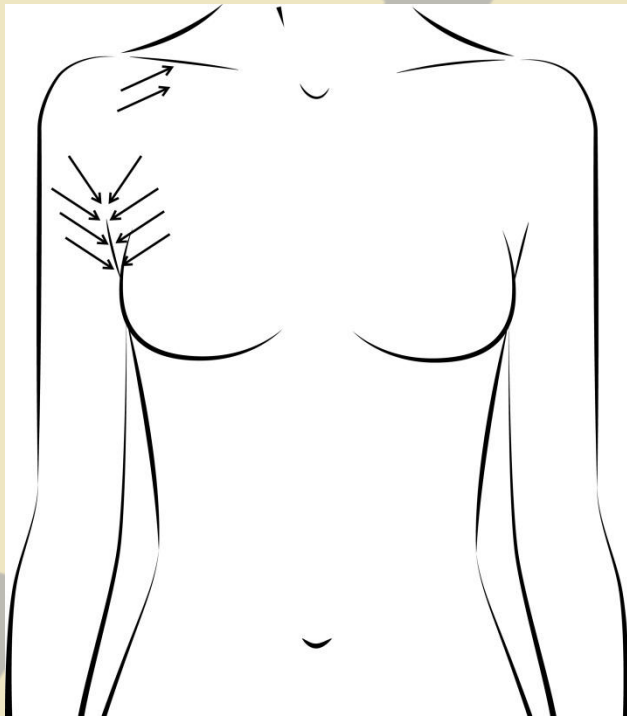
Στόχος θεραπείας - περιοχή	Μασχάλη	Εικόνα 
Βάθος εισαγωγής	Υποδόριος ιστός	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 27G 60mm	
Τεχνική εισαγωγής	Παράλληλη	

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Οδηγός θεραπείας

Στόχος θεραπείας - περιοχή	Οπίσθια γραμμή στηθόδεσμου	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Υποδόριος ιστός	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 27G 60mm	
Τεχνική εισαγωγής	Παράλληλη, Πλέγμα	

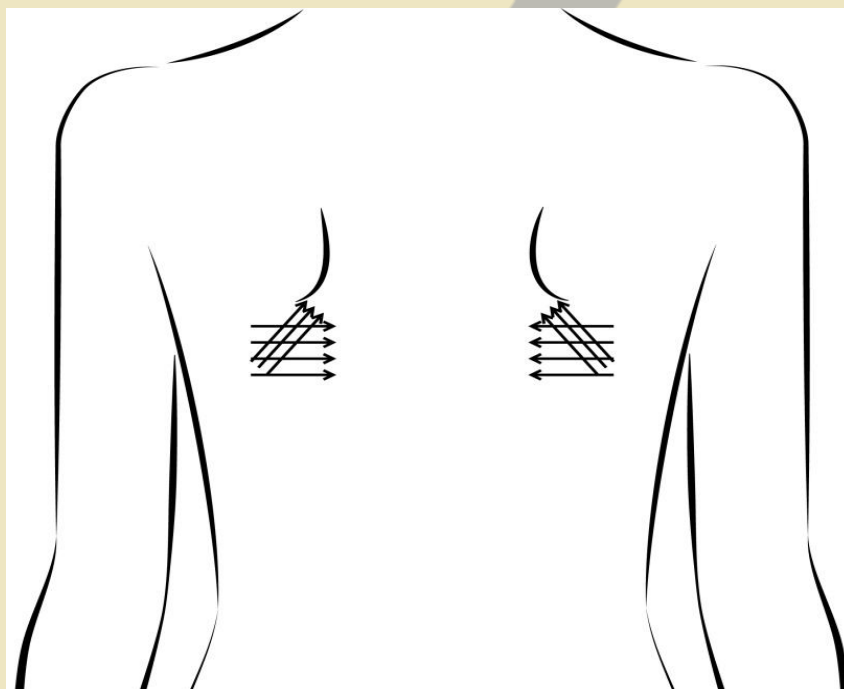


Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2. Οδηγός Θεραπείας

Στόχος θεραπείας- περιοχή	Love handle	Εικόνα
Βάθος εισαγωγής	Υποδόριος ιστός	
Συνιστώμενος τύπος βελόνας	TWISTED MONO 27G 60mm	
Τεχνική εισαγωγής	Παράλληλη	

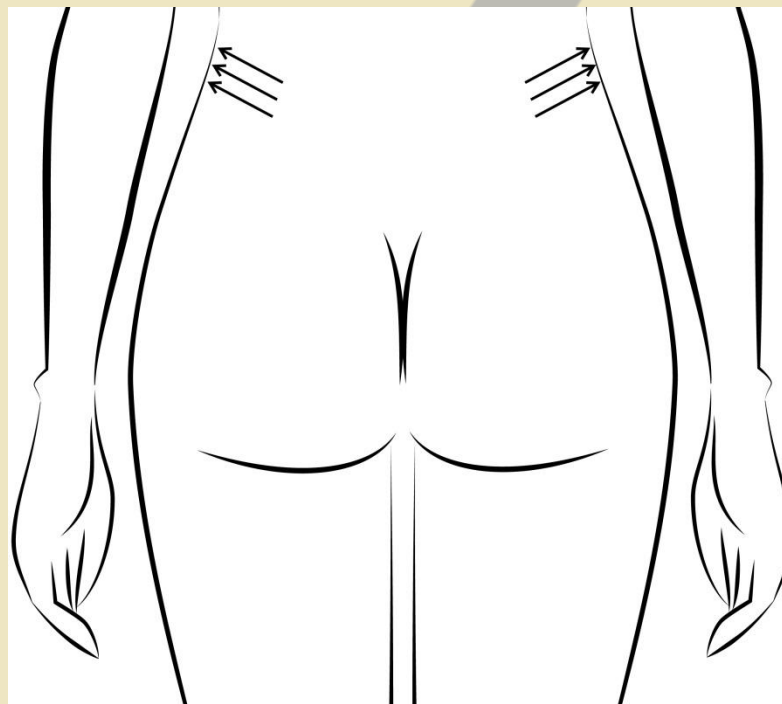

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι απαραίτητο να δοθούν στους ασθενείς οι κατάλληλες οδηγίες για τη μεταθεραπευτική περίοδο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι επιπλοκών κατά την ανάρρωση.

- Μετά τη θεραπευτική διαδικασία, ο ασθενής πρέπει να παραμείνει για 15 λεπτά στο χώρο του ιατρείου ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία ήταν καλά ανεκτή.
- Παγοκυψέλες ή ρολό πάγου θα πρέπει να εφαρμόζεται στην περιοχή της θεραπείας για περίπου 20 λεπτά για την αποφυγή οιδήματος ή μωλώπων καθώς και 3 φορές τη μέρα για τις επόμενες 48 ώρες.
- Ο πόνος μπορεί να αντιμετωπιστεί με αγωγή από το στόμα. Η ιβουπροφαίνη αποφεύγεται για τον περιορισμό του μώλωπα – συνήθως υποχωρεί μέσα στις πρώτες μέρες.
- Προτείνεται η ανύψωση της κεφαλής στον ύπνο κατά την πρώτη μέρα για τη μείωση του οιδήματος.
- Συνιστάται στον ασθενή να κοιμάται ανάσκελα (με την πλάτη) για μία εβδομάδα. Πρέπει να αποφεύγεται το υπερβολικό άνοιγμα του στόματος (φωνές, χασμουρητό, τραγουδι, κ.α) και κάθε είδους μασάζ για 3 εβδομάδες. Η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει πόνο ή παραισθησία με διάρκεια 1 περίπου εβδομάδας μετά τη θεραπεία, σε περίπτωση που οι λεμφαδένες ή τα νεύρα διεγερθούν κατά τη θεραπεία. Ο ασθενής δεν πρέπει να κάνει γκριμάτσες / συνοφρύωμα της υπο θεραπεία περιοχής.
- Κατά τη μέρα της θεραπείας, απαγορεύονται όλες οι ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση της φλεγμονής όπως σάουνα, λουτρό, κατανάλωση αλκοόλ.
- ΜΗΝ κάνετε λήψη αντιφλεγμονώδων για τις επόμενες 2 εβδομάδες αν δεν είναι απαραίτητο. Για τη θεραπεία είναι επιθυμητή μια φυσιολογική φλεγμονώδης φάση προκειμένου να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
- Για τουλάχιστον 24 ώρες συνιστάται περιορισμός των έντονων δραστηριοτήτων. Η επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες μπορεί να γίνει μετά από 2 ~3 ημέρες.
- Η χρήση ενός επιδέσμου κεφαλής συνιστάται για την ακινητοποίηση/σταθεροποίηση των ιστών, την ενίσχυση των αποτελεσμάτων του lifting effect και για μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς για 3~4 μέρες.
- Το ραντεβού ελέγχου θα πρέπει να γίνει 2 μέρες μετά τη θεραπεία κυρίως για να ελεγχθεί αν υπάρχει εξώθηση των νημάτων ή κάποιο σημάδι μόλυνσης. Αν υπάρχει κάποια μόλυνση κατά μήκος του νήματος, το νήμα θα πρέπει να αφαιρεθεί σωστά και εγκαίρως. Οι ασθενείς δεν πρέπει να προσπαθήσουν να εισάγουν ξανά ή να αφαιρέσουν το νήμα μόνοι τους.

Αντενδείξεις και Παρενέργειες

Αντενδείξεις

- Ασθενείς με τάση για φλεγμονώδεις νόσους/διαταραχές όπως κυτταρίτιδα, έρπη ζωστήρα, απλό έρπη, κτλ σε σε κάθε περιοχή του δέρματος για 31 μέρες πριν τη θεραπεία
- Εγκυμοσύνη
- Προδιάθεση για χηλοειδή
- Ασθενείς με ιστορικό φτωχής τραυματικής επούλωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών με πρόσφατη, ανοιχτή πληγή
- Ασθενείς που ακολουθούν αντιεπιληπτική αγωγή.
- Αιμορραγικές διαταραχές
- Ψυχω-νευρωτικές διαταραχές
- Μη συνεργάσιμοι ασθενείς (ασθενείς απρόθυμοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες του γιατρού για το διάστημα μετά τη θεραπεία).
- Μη ρεαλιστικές προσδοκίες.
- Ασθενείς με εμφυτεύματα (πχ. σιλικόνη) στην περιοχή της θεραπείας
- Ασθενείς με μεγάλη χαλάρωση δέρματος και σε μεγάλη ηλικία θα παρουσιάσουν πολύ περιορισμένη βελτίωση.
- Ισχύουν όλες οι άλλες αντενδείξεις εμφυτευμάτων όπως: πολλαπλές δερματικέςαλλεργικές αντιδράσεις ή λοιμώξεις, νοσήματα που προσβάλουν το ανοσοποιητικό σύστημα όπως καρκίνος / HIV, κτλ, συστηματικά νοσήματα όπως

Παρενέργειες

- Αλλεργική αντίδραση στο αναισθητικό
- Μικρά αιματώματα ή υδαρείς φουσκάλες.
- Ήπια μόλυνση στο σημείο εισαγωγής του νήματος, παρά τη λήψη κάθε δυνατής προφύλαξης.
- Σε ένα πολύ μικρό αριθμό ασθενών, τα νήματα δεν λειτουργούν τόσο ικανοποιητικά.
- Σε περίπτωση απόσπασης του νήματος μπορεί να προκύψει ασυμμετρία.
- Αν τα νήματα τοποθετηθούν επιφανειακά, μπορεί να είναι ορατά. Μπορεί να γίνει αφαίρεση νημάτων όπως επίσης και εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων η οποία επιταχύνει τη διάσπαση των νημάτων.
- Ο κίνδυνος δημιουργίας ουλής απο την εισαγωγή είναι πολύ μικρός, παρ'όλ'αυτά είναι πιθανός ειδικά σε ασθενείς με σκούρο δέρμα. Όλοι οι ασθενείς συμβουλεύονται να φορούν αντιηλιακό ώστε να προστατεύουν επαρκώς απο την έκθεση στον ήλιο τις περιοχές που ενδέχεται να εμφανίσουν ουλή.
- Στη θεραπεία νημάτων δεν πραγματοποιείται αφαίρεση δέρματος, όπως στα χειρουργικά lifting προσώπου. Ενδέχεται επομένως να υπάρχουν μικρές ατέλειες στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, ανάλογα με το βαθμό χαλαρότητας του δέρματος.
- Μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν έλλειψη ευαισθησίας ή μούδιασμα στην περιοχή θεραπείας, η οποία συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες εβδομάδες απο τη διαδικασία.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

1. Θεραπευτική επιλογή

- 1) Εισαγωγή περίπου 100 νημάτων / θεραπεία – σύνολο 3 ~ 5 συνεδρίες ανά 2 εβδομάδες.
- 2) Εισαγωγή περίπου 250 νημάτων στην 1^η θεραπεία και περίπου 100~120 νημάτων στη 2^η θεραπεία (1 μήνα μετά την 1^η θεραπεία).

Και στις 2 περιπτώσεις, τα αποτελέσματα διαρκούν περίπου 2 ~ 3 χρόνια. Μία θεραπεία των 100 περίπου νημάτων δίνει αποτελέσματα που διαρκούν γύρω στους 12 ~18 μήνες.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

2. Συνδυαστικά πρωτόκολλα

- Η θεραπεία MESOTRAX μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες θεραπείες όπως HIFU, Laser, Microneedling, RF, Filler, Botox, ή PRP.
- Πρώτα εκτελείται η θεραπεία MESOTRAX και μετά, στην ίδια συνεδρία, μπορούν να εφαρμοστούν άλλες θεραπείες. Σημειωτέον ότι τα RF ενδέχεται να προκαλέσουν πιο γρήγορη διάσπαση των νημάτων. Σε θερμοκρασία ιστού άνω των 38 βαθμών, τα νήματα μπορεί να υδρολυθούν γρήγορα. Όταν τα νήματα εισάγονται επιφανειακά και είναι ορατά, τα RF μπορεί να εφαρμοστούν για να λύσουν το πρόβλημα, μετά τη θεραπεία MESOTRAX.
- Αν η κατάσταση του δέρματος δεν ενδείκνυται για εφαρμογή της 2^{ης} θεραπευτικής επιλογής (Microneedling, Filler, Botox, Laser, PRP, IPL, κτλ.) στην ίδια συνεδρία, συνιστάται αυτή να εφαρμόζεται αφού υποχωρήσει ο μώλωπας. Συνήθως αυτή η περίοδος είναι περίπου 2 εβδομάδες μετά τη θεραπεία σε περίπτωση εισαγωγής 100 ~200 νημάτων και ενδέχεται να είναι 1 μήνας για εισαγωγή > 200 νημάτων.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

3. Συνδυαστικό πρωτόκολλο με GENOSYS Roller

Η θεραπεία GENOSYS Roller, ως αναζωογονητική θεραπεία μετά τη βασική θεραπεία νημάτων MESOTRAX, ενισχύει τα αποτελέσματα της.



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

3. Συνδυαστικό πρωτόκολλο με GENOSYS Roller


Εβδομάδα	Στόχος	Θεραπευτική μέθοδος
1	Lifting	MESOTRAX
2	Ενυδάτωση	Οικιακή φροντίδα με GENOSYS SRP(SOOTHING REPAIR POSTCREAM) και PHG(PEPTIDE GEL MASK)
3	Αναζωογόνηση & Ενυδάτωση	Θεραπεία GENOSYS Roller(0.25 or 0.5mm) με GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION (ορό ενίσχυσης υαλουρονικού οξέος) για ενίσχυση της επούλωσης και αναζωογονητικό αποτέλεσμα.
4	Ενυδατωση	Οικιακή φροντίδα με GENOSYS SRP και PHG
5	Lifting	MESOTRAX
6	Ενυδάτωση	Οικιακή φροντίδα με GENOSYS SRP και PHG
7	Αναζωογόνηση & Ενυδάτωση	Θεραπεία GENOSYS Roller(0.25 or 0.5mm) με GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION (ορό ενίσχυσης υαλουρονικού οξέος) για ενίσχυση της επούλωσης και αναζωογονητικό αποτέλεσμα.
8	Ενυδάτωση	Οικιακή φροντίδα με GENOSYS SRP και PHG
9	Lifting	MESOTRAX
10	Ενυδάτωση	Οικιακή φροντίδα με GENOSYS SRP και PHG
11	Αναζωογόνηση & Ενυδάτωση	Θεραπεία GENOSYS Roller(0.25 or 0.5mm) με GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION (ορό ενίσχυσης υαλουρονικού οξέος) για ενίσχυση της επούλωσης και αναζωογονητικό αποτέλεσμα.
12	Ενυδάτωση	Οικιακή φροντίδα με GENOSYS SRP και PHG
13~	Συντήρηση	Θεραπεία GENOSYS Roller(0.25 or 0.5mm) με GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION (ορό ενίσχυσης υαλουρονικού οξέος) για ενίσχυση της επούλωσης και αναζωογονητικό αποτέλεσμα.

Κλινικά αποτελέσματα

Πριν και μετά - 1



Πριν και μετά - 2

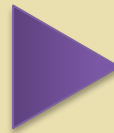

Πριν και μετά - 3



Photo Courtesy of
Dr. Srecko Budi

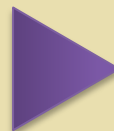


Photo Courtesy of
Dr. Srecko Budi

Πριν και μετά - 4



Photo Courtesy of
Dr. Srecko Budi



Photo Courtesy of
Dr. Srecko Budi

Σας
ευχαριστούμε